

Simplifiez vos empreintes. Multipliez votre efficacité.

Changez votre système dès maintenant!

No. Article	Emballage	Contenu
66099318	Flexitime unlimited Refill	2 x 50 ml Flexitime unlimited 1 x 5 Embouts mélangeurs verts 1 x 6 Embouts intra-oraux blancs Mode d'emploi Flexitime
66099317	Flexitime unlimited Dynamix Refill	2 x 380 ml Flexitime unlimited 2 x Embouts mélangeurs 5:1 Dynamix 1 x Anneau de fixation Guide pas à pas Flexitime Mode d'emploi Flexitime
66099321	Flexitime unlimited Trial Kit	1 x 50 ml Flexitime unlimited 3 x Embouts mélangeurs verts 6 x Embouts intra-oraux blancs Mode d'emploi Flexitime
66099319	Flexitime unlimited Dynamix Trial Kit	1 x 380 ml Flexitime unlimited 10 x Embouts mélangeurs 5:1 Dynamix 1 x Anneau de fixation Guide pas à pas Flexitime Mode d'emploi Flexitime

Demandez dès aujourd'hui votre échantillon gratuit et découvrez la puissance de « l'impression unlimited » : kulzer.be/flexitime-unlimited



RetraXil® — fonctionne parfaitement avec Flexitime unlimited

RetraXil est une pâte de rétraction astringente destinée au déplacement temporaire de la gencive marginale et au séchage du sulcus gingival.

Vos avantages:

- **Prêt à l'emploi**, sans risque de surdosage systémique.
- **Contraste de couleur** avec la gencive et les dents pour une **excellente visibilité** et un contrôle optimal lors du rinçage.
- **Système de fixation sécurisé** permettant de visser et dévisser la canule facilement.
- **Canule fine** pour une application précise et atraumatique dans le sulcus et les zones interproximales.
- Compatible avec les techniques d'empreinte analogiques et numériques.
- **Moins d'étapes de travail** comparé à l'utilisation de fils de rétraction.



never

impression unlimited[®] impression unlimited[®] impressio

change[®]

a running

system



impression unlimited[®] by Kulzer



Impression unlimited? Flexitime unlimited!

Développé avec
une nouvelle
formulation
(en cours de
brevet)


Matériau d'empreinte de précision de nouvelle génération de Kulzer

Pourquoi cela fonctionne:

- ❶ **Propriétés mécaniques** optimisées grâce à
 - de nouvelles charges (**brevet en attente**) pour une meilleure dureté et une plus grande élongation à la rupture
 - une nouvelle huile silicone assurant l'équilibre entre stabilité et fluidité
 - de nouveaux additifs garantissant une excellente stabilité au stockage sans séparation et une dureté Shore-A élevée associée à une forte « dureté perçue »
- ❷ **Cinétique de prise** optimisée
 - comportement de polymérisation optimisé pour un véritable effet « Snap & Set »
 - matériau entièrement polymérisé à la fin du temps de prise (2:30 min) = aucune phase prolongée de déformation après la prise


Pourquoi choisir Flexitime unlimited pour vos empreintes dentaires:

- ❸ **Votre technique, vos règles.**
 - Indiqué pour toutes les techniques d'empreinte
 - Un seul matériau au lieu de plusieurs – moins de stock et de complexité
- ❹ **Le temps joue en votre faveur.**
 - Temps de travail flexible (1:00 – 2:30 min) = « fast set » et « regular set » en un seul matériau (2 en-1)
 - Temps de prise intra-orale court « Snap & Set » : 2:30 min.
- ❺ **Une précision visible – et perceptible.**
 - Rigidité élevée pour une reproduction des détails exceptionnelle et un repositionnement sécurisé
 - Retrait facile – confortable pour vous comme pour vos patients
 - Couleur grise offrant un contraste optimal avec le sang et les matériaux de correction = excellente lisibilité
- ❻ **Recommandé par vos confrères.**
 - 91% des dentistes déclarent recommander ce matériau¹

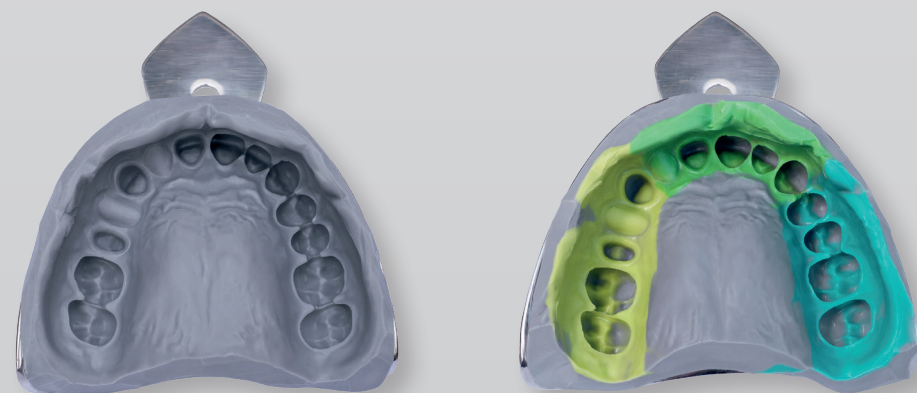

Snap. Set. Success.


La chimie de Flexitime unlimited permet un processus de polymérisation « Snap & Set », ce qui signifie que le matériau d'empreinte est totalement polymérisé à la fin du temps de prise.²

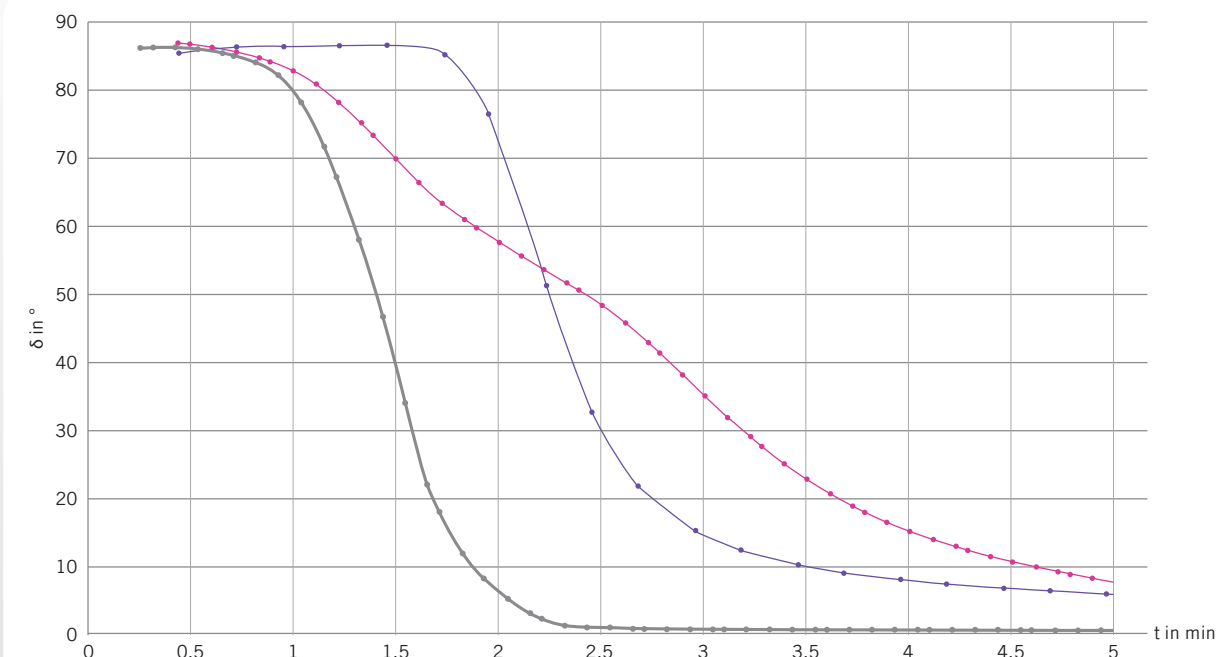

Snap & Set expliqué (illustration):

Une courbe abrupte qui s'aplatit (ligne grise, ex. Flexitime unlimited) signifie que le matériau est entièrement polymérisé après le temps de prise indiqué dans le mode d'emploi. Une courbe plus progressive indique, en revanche, que le matériau met plus de temps à polymériser complètement.

- ❷ **Vos avantages:**
 - **Gain de temps** – matériau totalement polymérisé à la fin du temps de prise, sans attente supplémentaire
 - **Résultats fiables** – aucune phase prolongée de déformation après le retrait, contrairement à certains concurrents
 - **Flux de travail prévisible** – transition rapide et fiable de l'état malléable à l'état complètement polymérisé

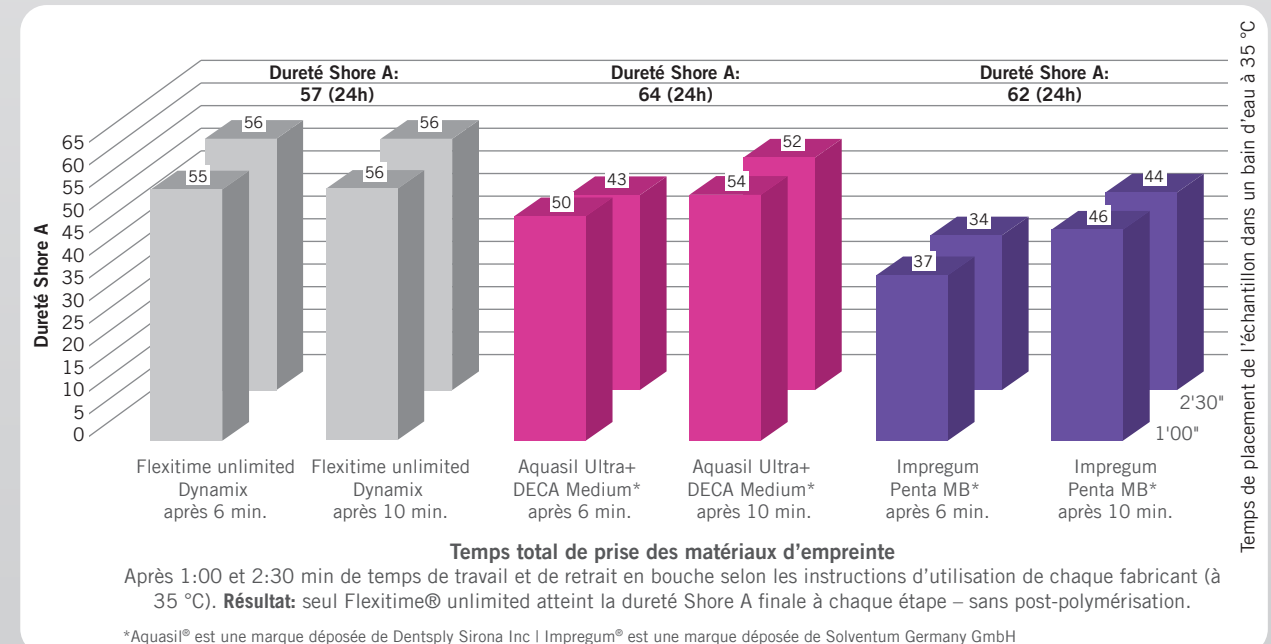

¹ Basé sur une étude d'expérience client conçue, menée et analysée par Kulzer. Données internes.

² Basé sur des mesures internes. Données internes.