

Illuminez votre journée.

KULZER Translux® Cure

La photopolymérisation associée à une utilisation intuitive, avec des fonctionnalités avancées intégrées dans un design stylo léger et ergonomique.




KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

ILLUMINEZ VOTRE PHOTOPOLYMERISATION AU QUOTIDIEN

Allégez votre pratique quotidienne: la lampe Kulzer Translux Cure est conçue pour offrir une photopolymérisation intuitive et ergonomique, et s'intègre naturellement à votre workflow clinique. Grâce à son design **stylo léger**, à sa **tête rotative à 360°** et à **ses trois modes d'utilisation clairement définis**, elle assure une manipulation sûre et confortable à chaque étape, du positionnement à l'application. En plus des modes **CURE** et **POWER**, le mode **DETECT** facilite le contrôle clinique en révélant par fluorescence les restaurations et résidus de composite, les caries actives ainsi que la plaque dentaire.

ILLUMINEZ VOTRE EXPÉRIENCE D'UTILISATION

- Design stylo léger de seulement 109g pour un confort optimal
- Tête rotative à 360° pour un positionnement précis et ergonomique
- Permet une application aisée, même dans les zones difficiles d'accès ou en cas d'ouverture buccale réduite

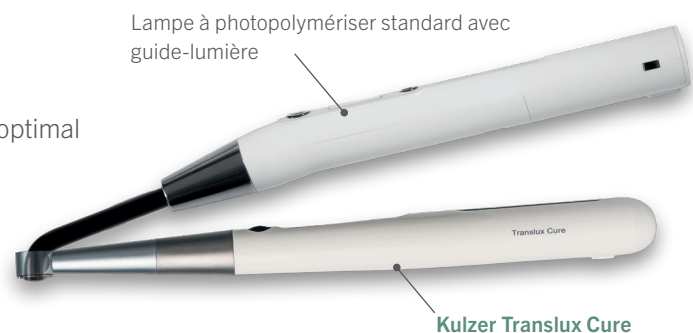


ILLUMINEZ LA SIMPLICITÉ


- 3 modes clairement définis: CURE / POWER / DETECT
- Utilisation simple à deux boutons: bouton Marche/Arrêt et bouton S pour le changement de mode
- Temps prédéfinis: CURE 20 s, POWER 10 s, DETECT 60 s
- Écran LCD facile à lire, conçu pour une utilisation confortable aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers
- Aucun changement d'accessoire nécessaire pour utiliser le mode DETECT

ILLUMINEZ VOTRE CONFIANCE


- Technologie à 4 LED (3 bleues + 1 violette)
- Large spectre de longueurs d'onde de 380 à 515 nm en modes CURE et POWER
- Mode CURE : intensité de 1 500 mW/cm² pour les résines et composites dentaires
- Mode POWER : intensité de 2 300 mW/cm² pour la polymérisation des matériaux nécessitant une puissance accrue
- Faisceau lumineux homogène et uniforme

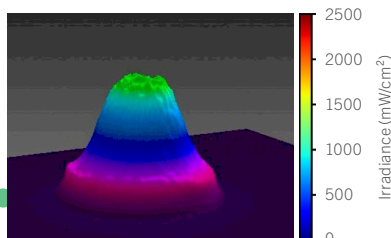


Profil 3D du faisceau lumineux d'une **lampe concurrente** à 0 mm de l'extrémité de l'embout

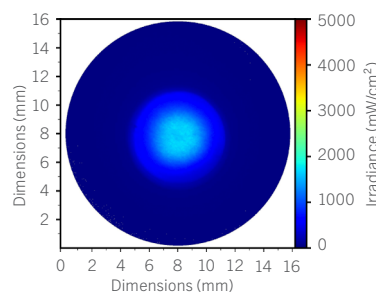

Profil 2D du faisceau lumineux d'une **lampe concurrente** à 0 mm de l'extrémité de l'embout

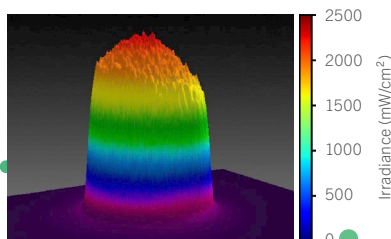

Profil 3D du faisceau lumineux de la lampe **Kulzer Translux Cure** à 0 mm de l'extrémité de l'embout, montrant une homogénéité élevée de l'irradiance

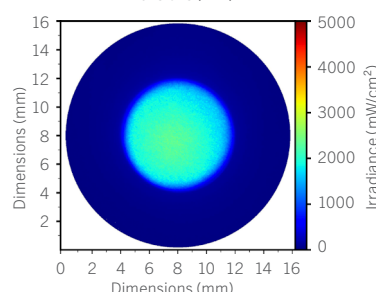

Profil 2D homogène du faisceau lumineux de la lampe **Kulzer Translux Cure** (mode CURE) à 0 mm de l'extrémité de l'embout

ILLUMINEZ ET DÉCOUVREZ LA VALEUR AJOUTÉE

Le mode DETECT facilite la détection par fluorescence des restaurations et résidus de composite, des caries actives ainsi que de la plaque dentaire.



Source de l'image: Dr Marcus Holzmeier, Allemagne

Le mode DETECT permet de visualiser l'élimination complète d'un composite sur une incisive latérale ainsi qu'un attachement fluorescent sur une canine.

ILLUMINEZ VOTRE EFFICACITÉ AU QUOTIDIEN

- Une autonomie adaptée à la pratique quotidienne - jusqu'à 225 cycles (mode CURE) avec une seule charge complète
- La lampe Kulzer Translux Cure intègre un système de régulation de puissance. Même lorsque le niveau de charge de la batterie diminue, les LED continuent de fonctionner à puissance électrique constante afin de maintenir une intensité lumineuse homogène et conforme aux spécifications.

Caractéristiques techniques	Kulzer Translux Cure
Stylo poids	109 g
Design	Design stylo avec tête rotative à 360°
Technologie LED	4 LED (3 bleues + 1 violette)
Modes	CURE / POWER / DETECT
Plage de longueurs d'onde CURE	380-515 nm avec pics à 400 et 460 nm $\pm$ 10 nm
Plage de longueurs d'onde POWER	380-515 nm avec pics à 400 et 460 nm $\pm$ 10 nm
Plage de longueurs d'onde DETECT	380-420 nm avec pic à 400 nm $\pm$ 10 nm
Mode CURE, intensité lumineuse	1500 mW/cm ²
Mode POWER, intensité lumineuse	2300 mW/cm ²
Mode DETECT, intensité lumineuse	600 mW/cm ²
Diamètre de l'embout lumineux	9,3 mm
Capacité de la batterie / nombre de cycles	Mode POWER (10 s): jusqu'à 280 cycles Mode CURE (20 s): jusqu'à 225 cycles Mode DETECT (60 s): jusqu'à 225 cycles
Garantie	12 mois



TRANSLUX CURE

Produit	Référence
Kulzer Translux Cure	66112392

Accessoires	Référence
Manchons de protection jetables Kulzer Translux Cure, boîte de 100	66112579
Écran de protection lumineuse Kulzer Translux Cure	66112580
Base de charge Kulzer Translux Cure	66112577
Pièce à main Kulzer Translux Cure	66112576
Source lumineuse Kulzer Translux Cure	66112578
Adaptateur d'alimentation Kulzer Translux Cure 1 EU, 1 US, 1 UK	66112581



Écran de protection lumineux

et manchons de protection jetables inclus

ILLUMINE TOUT LE WORKFLOW KULZER

Découvrez notre gamme complète de solutions restauratrices conçues pour optimiser votre workflow à chaque étape. Que vous privilégiez l'efficacité ou une esthétique d'exception, nous avons la solution parfaitement adaptée à vos besoins.

